

マイクロリットルシステム 60 周年記念キャンペーン

2024年 7月8日 ~ 11月29日



Small volumes, Big dreams

マイクロリットルシステム 60 周年記念キャンペーン

マイクロピペット、マイクロチューブ、遠心機。エッペンドルフがこれらの微量サンプル操作に欠かせない**マイクロリットルシステムを完成させて、2024 年で 60 周年を迎えました。**

これを記念いたしましてエッペンドルフ遠心機 60周年記念の特別なオファーを用意しました！
対象機種購入でもれなく人気のピペットや、マイクロチューブをプレゼントします。

選べるプレゼント（希望小売価格25,200円 ~ 51,000円相当）がついてくる貴重なチャンス
を是非お見逃しなく！

① シングルピペット
(100 - 1000 μ L)



リサーチプラス×1本
>容量範囲：100 - 1000 μ L

② シングルピペット
(20 - 200 μ L)



リサーチプラス×1本
>容量範囲：20-200 μ L

③ マイクロチューブ



エッペンドルフ セーフロックチューブ
1.5 mL
>Eppendorf Quality®, 1,000本

マルチチャンネルピペットやピペット4本
パック、6本パックもキャンペーン実施中
です。詳細はこちらをご確認ください。





Centrifuge 5425

冷却なし

- > 加減速を各10段階で設定可能
- > 静かな運転音を実現
- > 5425シリーズは6種類のローターに対応
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバーを付属したローター FA-24×2 付

最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
最高回転速度：15,060 rpm
最大遠心加速度：21,300 × g
本体寸法 (W×D×H)：240 × 390 × 240 mm

ローター FA-24x2 付
注文番号：5405000433
希望小売価格：365,000円
キャンペーン特別価格：292,000円



製品ページ

20%OFF

+

選べる
プレゼント



Centrifuge 5425 R

冷却付き

- > 静かな運転音を実現
- > 設定温度に迅速に到達できるFastTemp 機能付き
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバーを付属したローター FA-24×2 付

最大容量：24 × 1.5 / 2.0 mL
最高回転速度：15,060 rpm
最大遠心加速度：21,300 × g
本体寸法 (W×D×H)：290 × 480 × 260 mm

ローター FA-24x2 付
注文番号：5406000437
希望小売価格：667,000円
キャンペーン特別価格：533,600円



製品ページ

20%OFF

+

選べる
プレゼント

主な機能

ローター FA-24x2

- > 最大遠心加速度：21,300 × g (15,060 rpm)
- > 最大容量：24×1.5 / 2.0 mLチューブ



適用機種：5425/5425 R



利便性が向上

- > ショートスピナー機能
- > 遠心終了後の経過時間を表示



革新的なローターカバー開閉メカニズム
> Eppendorf QuickLock®：人間工学に基づくローターカバーロックシステム
> 1/4回しただけでローターカバーがロックされる構造により、手首の負担が軽減



汎用性向上

- > スナップキャップとスクリューキャップ両方の5.0 mLチューブに対応した10本架けアングルローター
- > 分割可能なPCRプレートを選べるスイングバケットローター

5425 / 5425 R と同時購入で対応ローターも

20% OFF !



適用機種：5425/5425 R

ローター FA-10x5

- > 最大遠心加速度：21,300×g (15,060 rpm)
- > 最大容量：10×Eppendorf Tubes® 5.0 mL
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバー付き

注文番号：5495505008
希望小売価格：137,000円
キャンペーン特別価格：109,600円



適用機種：5425/5425 R

ローター FA-24x2-PTFE

- > 最大遠心加速度：21,300×g (15,060 rpm)
- > 最大容量：24×1.5 / 2.0 mLチューブ
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバー付き
- > 耐薬品性を向上させるPTFEコーティング

注文番号：5495503005
希望小売価格：137,000円
キャンペーン特別価格：109,600円



適用機種：5425/5425 R

ローター S-96x0.2-PCR

- > 最大遠心加速度：3,217 × g (6,000 rpm)
- > 新型スイングローター
- > 12本の8-PCRストリップ
- > 0.1 / 0.2 mLか、4枚の× 1 / 4 twin.tec PCRプレート96、スカートなし分割可能または容量0.2 mLの96 × PCR チューブ用

注文番号：5495512004
希望小売価格：108,000円
キャンペーン特別価格：86,400円



適用機種：5425/5425 R

ローター FA-18x2-Kit

- > 最大遠心加速度：18,565×g (15,060 rpm)
- > スピンカラム18本用ローター
- > チューブキャップの背面が高いデザイン
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバー付き

注文番号：5495508007
希望小売価格：85,500円
キャンペーン特別価格：68,400円

※本カタログに掲載していないローターやアダプタも用意しております。詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。



Centrifuge 5430

冷却なし

- > 1.5 mLチューブから50 mLコンカルチューブ、マイクロプレートまで利用可能。
- > 5430シリーズは12種類のローターに対応
- > 医療機器モデルも用意しています
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバーを付属したローター FA-45-30-11 付

一般医療機器モデルも選択できます
(お問い合わせください)

最大容量: 48 × 1.5/2.0 mL, 16 × 5.0 mL,
6 × 50 mL, 2 × MTP
最高回転速度: 17,500 rpm
最大遠心加速度: 30,130 × g
本体寸法 (W×D×H): 340 × 420 × 250 mm

ローター FA-45-30-11 付

注文番号: 5427000437

希望小売価格: 527,000円

キャンペーン特別価格: 421,600円



製品ページ

20%OFF

+

選べる
プレゼント



Centrifuge 5430 R

冷却付き

- > マイクロ遠心機のフラッグシップモデル
- > 最大30,130×gを実現
- > エネルギー消費を削減するECOシャット
ダウン機能を搭載
- > 医療機器モデルも用意しています
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバーを付属したローター FA-45-30-11 付

一般医療機器モデルも選択できます
(お問い合わせください)

最大容量: 48 × 1.5/2.0 mL, 16 × 5.0 mL,
6 × 50 mL, 2 × MTP
最高回転速度: 17,500 rpm
最大遠心加速度: 30,130 × g
本体寸法 (W×D×H): 380 × 640 × 296 mm

ローター FA-45-30-11 付

注文番号: 5428000430

希望小売価格: 1,020,000円

キャンペーン特別価格: 816,000円



製品ページ

20%OFF

+

選べる
プレゼント




ローター FA-45-30-11

- > 最大遠心加速度: 20,817 × g (14,000 rpm)
- > 最大容量: 30 × 1.5 / 2.0 mLチューブ
- > 安全に遠心分離するためのエアロゾル密閉性Eppendorf QuickLock®カバー付き
- > 適用機種: 5430/5430 R

先進のオペレーティングシステム

Centrifuge 5430と5430 Rには先進のオペレーティングシステムが搭載されており、大型バックライト付きディスプレイを備え、多言語操作のメニューがあります。また、最大50のユーザーが設定したプログラムを保存可能で、ルーチンでアクセスし易い5つのプログラムキーを搭載しています。Centrifuge 5430 RはECOシャットオフ機能とFastTemp pro付きです。この機能は、事前にプログラム機能で日付と時間に基づき自動予冷ができ、特定の日付や週のうちの数日の設定が可能です。ラボから退室するときに遠心機をスタンバイモードに切り替えるだけで、あとはFastTemp proが翌朝に予冷を済ませます。この操作により夜間電力の90%の節電にもなります。また、ECOシャットオフ機能は、1時間、2時間、4時間、または8時間の作動停止後にコンプレッサーを停止してコンプレッサーの寿命を延ばすことにも貢献します。

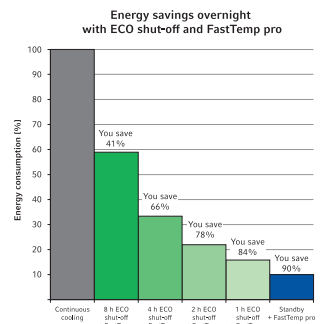

5430 / 5430 R と同時購入で対応ローターも 20% OFF !



ローター FA-45-48-11

- > 最大遠心加速度: 18,210 × g (外側)
16,049 × g (内側)
(12,700 rpm)
- > 最大容量: 48 × 1.5 / 2.0 mLチューブ
- > 安全に遠心分離するためのエアロゾル密閉性Eppendorf QuickLock®カバー付き

注文番号: 5427754008
希望小売価格: 120,000円

キャンペーン特別価格: 96,000円



ローター FA-45-24-11-HS

- > 最大遠心加速度: 30,130 × g (17,500 rpm)
- > 最大容量: 24 × 1.5 / 2.0 mLチューブ
- > 安全に遠心分離するためのエアロゾル密閉性ローターカバー付き
- > 耐薬品性向上のためのPTFEコーティング

注文番号: 5427710000
希望小売価格: 106,000円

キャンペーン特別価格: 84,800円



ローター S-24-11-AT

- > 最大遠心加速度: 16,049 × g (12,700 rpm)
- > 24 × 1.5 / 2.0 mLチューブ用スイングバケットローター
- > エアロゾル密閉性のEppendorf QuickLock®カバー付き

注文番号: 5427757007
希望小売価格: 176,000円

キャンペーン特別価格: 140,800円



ローター FA-45-16-17

- > 最大遠心加速度: 21,191 × g (14,200 rpm)
- > 最大容量: 16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL
- > 安全に遠心分離するためのエアロゾル密閉性Eppendorf QuickLock®カバー付き
- > スクリューキャップ付きのEppendorf Tubes® 5.0 mLの架本数は8本 (半分) です

注文番号: 5427750002
希望小売価格: 138,000円

キャンペーン特別価格: 110,400円



ローター FA-45-24-11-Kit

- > 最大遠心加速度: 19,090 × g (13,200 rpm)
- > ローターの縁が高くなっており、24本までのスピナムをチューブの蓋を開けたまま安全に遠心可能です
- > 安全に遠心分離するためのエアロゾル密閉性Eppendorf QuickLock®カバー付き

注文番号: 5427752005
希望小売価格: 131,000円

キャンペーン特別価格: 104,800円



ローター A-2-MTP

- > 最大遠心加速度: 2,204 × g (4,680 rpm)
- > 2枚架のスイングローター、MTP、PCR、およびディープウェルプレート用
- > 静かな運転音を実現するウインドシールド
- > 最大プレート高さ: 29 mm

注文番号: 5427700005
希望小売価格: 207,000円

キャンペーン特別価格: 165,600円



ローター F-45-64-5-PCR

- > 最大遠心加速度: 13,543 × g (11,800 rpm)
- > 最大64本の0.2 mL PCRチューブ用PCRストリップチューブローター

注文番号: 5427714006
希望小売価格: 126,000円

キャンペーン特別価格: 100,800円



ローター F-35-6-30

- > 最大遠心加速度: 7,745 × g (7,830 rpm)
- > 最大容量: 6 × 15 / 50 mLコンカルチューブまたは12 × Vacutainer®チューブ用ローター
- > 15ml50mlコンカルチューブ用アダプタ付属

注文番号: 5427716009
希望小売価格: 207,000円

キャンペーン特別価格: 165,600円

ローター適用機種: 5430/5430 R

※本カタログに掲載していないローターやアダプタも用意しております。詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせください。



お客様へ最適なソリューションをお届けすることが弊社の目標です。
マイクロ遠心機や卓上遠心機から、高速冷却遠心機、超遠心機まで、幅広い弊社のポートフォリオは、分子生物学、生化学、細胞生物学の分野で、ソリューションを総合的に提供できるようになっています。幅広い遠心機のポートフォリオで、分離に関する不安を取り除き、お客様の最重要事項である研究に集中できることをエッペンドルフは願っています。

【お問い合わせはこちら】

エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル3F Tel: 0120-024-125 Email: Life-Science@eppendorf.jp

www.eppendorf.com

Eppendorf® and the Eppendorf Brand Design are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2024 by Eppendorf SE. 本カタログに記載されている製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2024年7月現在の価格で、消費税は含まれておりません。